




大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

ジェルクッション 取扱説明書

このたびはジェルクッションをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

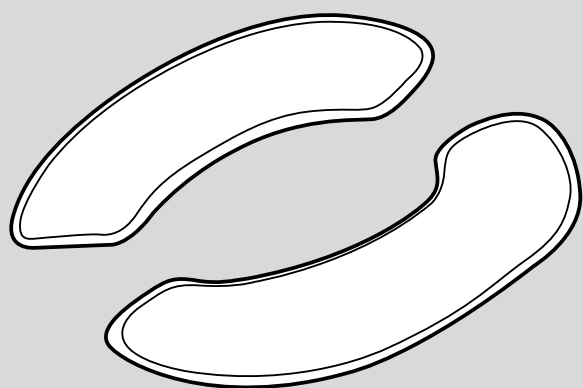

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた	3~4
お手入れの方法	5

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



注意

ジェルクッションを使用するときは、便座にジェルクッションを貼りつけ、その上から便座カバーを取り付けること
フィルムが劣化して破れ、使用できなくなります。




トイレに落ちてしまった場合は、必ず拾いあげること
そのまま水に流すとトイレを詰まらせる恐れがあります。

使用者の身体状況によっては介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネジャーなど専門家に相談すること

ジェルクッションのフィルムが破れたときは、使用しないこと
ジェルからにじんだオイルが肌に付着して、体質によってはかぶれる恐れがあります。

ジェルクッションは突起物や爪で表面を傷つけたり、むやみに引張らないこと
フィルムが破れ、使用できなくなります。

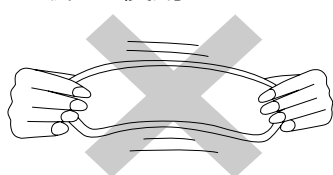

ジェルクッションを取り付けた状態でトイレの蓋を閉めないこと

フィルムが破れ、使用できなくなります。




ジェルクッションに手をついて立ち座りを行わないこと

ジェルクッションや手が滑り、転倒し、けがの原因になります。


ジェルクッションをストーブの前に置いたり、熱湯をかけたり、直射日光に当たったり、戸外に放置しないこと

フィルムが劣化または破損し、使用できなくなります。

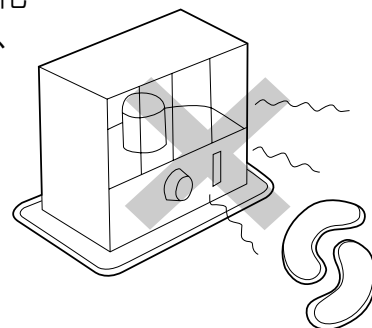

子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

各部のなまえ

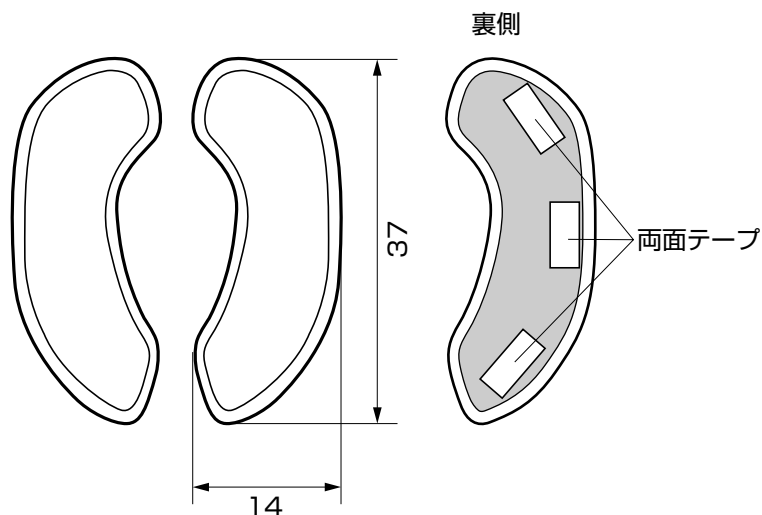


■仕様

品 名	ジェルクッション
材 質	ジェル……エラストマー ジェルフィルム…ポリウレタン
サ イ ズ	37×14×厚み1.5cm (片方)
重 量	約800g
付 属 品	・専用O型便座カバー 2枚 ・交換用両面テープ 2セット

万が一、フィルムが破れ手や肌にジェルが付着したときには、すぐに石けん等で洗い流してください。

※ジェルには有害物質は含まれておりませんので、すぐに洗い流していただければ、問題ありません。

※ジェルは食べることができませんので、口に入れないようご注意ください。

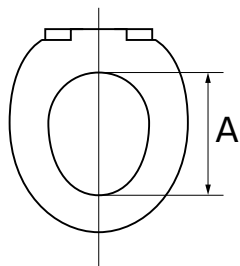

●取り付け可能便座サイズ●

ご使用されている便座のA寸法を測定し、
取り付け可能かどうかを確認してください。


A 31cm以下

※上記取り付け可能サイズでも一部特殊な形状をした便座には取り付けできない場合があります。

※着座センサー付きのトイレの場合は、シャワーおよび脱臭機能が正常に作動しなくなる場合があります。

使いかた

- 1 ジェルクッション裏のはくり紙をはがし、現在ご使用されている洋式トイレ、ポータブルトイレ、温水洗浄便座にジェルクッションを直接貼り付けてください。

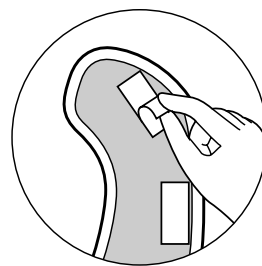


ジェルクッション裏のはくり紙をはがす。




注意

ジェルクッションは突起物や爪で表面を傷つけたり、むやみに引張らないこと
フィルムが破れ、使用できなくなります。

ジェルクッションのフィルムが破れたときは、使用しないこと
ジェルからにじんだオイルが肌に付着して、体質によってはかぶれる恐れがあります。

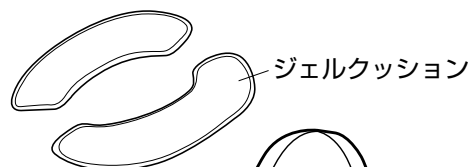


ジェルクッション

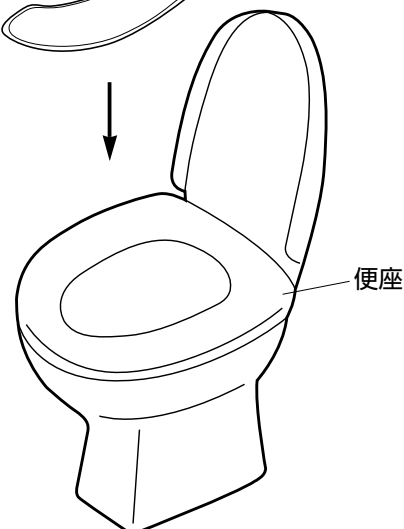

便座

※ジェルクッションを貼りつけるときは、便座開口部の縁に沿うようにセットしてください。

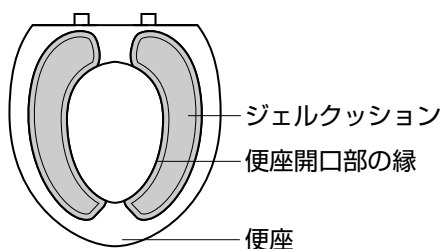

ジェルクッション

便座開口部の縁

便座

●ジェルクッション裏の両面テープについて

- ・粘着力がおちてきたときには、水で表面に付いたホコリを洗い流してください。水分が乾くと粘着力が復元します。
- ・3～5回洗って粘着力がおちてきたときには、交換用両面テープの黄色のはくり紙をはがして、必ず元のテープの上に重ねて貼り付けてください。

使いかた

2 ジェルクッションの上から便座カバーを取り付けてください。



ジェルクッションを使用するときは必ずジェルクッションの上から便座カバーを取り付けること
フィルムが劣化して破れ、ジェルクッションが使用
できなくなります。

■便座カバーの取り付け方法

材 質

表糸 アクリル100%
裏糸 ナイロン80%・ポリウレタン20%

①




カバーの裏面を外側にします。

②




カバーのパイプ部分を便座の裏側に
あて、ゴム部を便座の穴に通します。

③

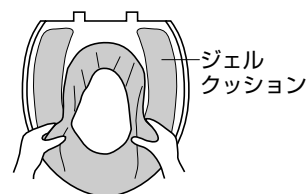


カバーのゴム付部を内部から外へめく
り返し、便座にひっかけていってくだ
さい。

④

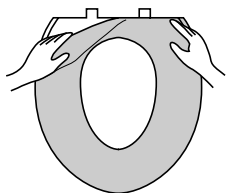

便座の先端部からひっかけるとうまく
取り付けられます。

⑤

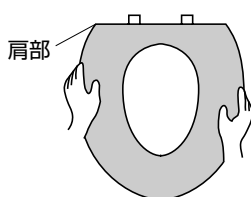

最後に便座の肩部にひっかけてください。



※付属の便座カバーが取り付けられない特殊形状便座にジェルクッションを取り付ける場合には、別
途それぞれの便座専用の便座カバーを購入してください。

※暖房便座でのご使用の際は、暖房スイッチをOFFにしてご使用ください。

※温水洗浄便座をご使用の場合、機種によっては以下のことが起こります。

- ・常時ONになる…座っていないなくてもボタンを押すとシャワーが出ます。また脱臭が作動します。
- ・常時OFFになる…シャワーや脱臭が作動しません。
- ・時々OFFになる…シャワーや脱臭が時々作動しません。

※自動便蓋開閉機能、自動洗浄機能のついた温水洗浄便座をご使用の場合は、それぞれのスイッチを
お切りください。

※静かに閉まるダンパー式の便座にジェルクッションを取り付けるとジェルクッションの重量により、
ダンパー効果が得られないことがあります。

お手入れの方法

●ジェルクッションは


- ・中性洗剤のうすめ液をスポンジか柔らかい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、必ず乾いた布で乾ぶきしてください。
- ・保管方法：50℃以下で直射日光の当たらない場所に保管してください。



- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等使用しないこと
表面が傷つき、フィルムが破れて使用できなくなります。
- 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
- アルコールを主成分とするトイレ用除菌剤は使用しないこと
- 直射日光が当たる場所に放置したり、乾燥器具等で乾燥させないこと
ジェルクッションのフィルムが破れたり、製品が劣化・変色・色落ちする恐れがあります。



●便座カバーは

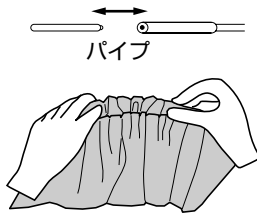

- ・お洗濯はパイプを便座カバーから抜き取ってから、ぬるま湯に中性洗剤を使って洗い、日陰干しにしてください。
- ※パイプは洗濯により変形する可能性がありますので、お洗濯の前に抜き取ってください。
- ※漂白剤は使わないでください。